

PROTOCOLO MÓVIL

Manual de uso

Manual de uso — versión 1.0

Componente móvil del proyecto Salufolio

Pierre-Henri Giraud

Ingeniero informático jubilado · Les Useres (Castellón), España

Julio de 2026

Programa libre — GNU General Public License v3

salufolio.com · github.com/caracole/Salufolio · salufolio@proton.me

Describe la versión 2026.7.29.12-SAT. Las figuras son capturas reales, en tema claro para la impresión, con datos de demostración.

1. Qué es y qué no es

El Protocolo móvil es un cuaderno de cuidados que vive en el teléfono situado junto a la cama. Se registra en él, con un toque, lo que acaba de ocurrir: una toma, una tensión, un vaso de agua, una noche mala, el oxígeno que se enciende. Los datos se guardan en el propio aparato y no salen de él salvo cuando usted los envía al ordenador de la casa.

Lo que no es: no es un aviso, no es un diagnóstico, no es una alarma. El programa no interpreta nada y no le pedirá nunca nada. Si un día no anota nada, no ocurre nada.

Tres reglas gobiernan toda la casa. Todo lo que usted escribe se guarda solo, en el instante mismo del gesto: no hay ningún botón «Guardar». Lo que no puede funcionar no se muestra. Y nada le será exigido: ni rituales, ni recordatorios, ni casillas obligatorias.

2. Instalación

Hay dos maneras de tener el Protocolo en el teléfono. Las dos envían al ordenador; la segunda evita tener que volver a copiar el fichero en cada versión nueva.

2.1 Copia local del fichero

El Protocolo es un único fichero HTML. Cópelo al teléfono y ábralo con el navegador. Funciona sin conexión, en cualquier sitio. Desde la versión satélite, esta copia local envía igual que la otra: el paquete parte sin esperar respuesta, como un formulario que se deposita.

2.2 Servido por el ordenador de la casa (más cómodo)

Con el servidor en marcha, abra en el teléfono la dirección que él mismo anuncia al arrancar, seguida de /protocolo:

```
http://<dirección-del-ordenador>:7777/protocolo
```

Añada la página a la pantalla de inicio: aparecerá como una aplicación.

Aviso: el teléfono y el ordenador deben estar en la misma red Wi-Fi. Con datos móviles no hay diálogo posible.

3. Primer arranque

La primera vez, la casa se presenta: el hexágono verde de Salufolio y la concha del peregrino. Esta pantalla se ve una sola vez.



Figura 1 — La bienvenida, con las armas de la casa. No vuelve a aparecer.

Después, el programa pide el primer paciente. No hay manera de empezar sin nombrar a alguien: un cuaderno de cuidados sin paciente no querría decir nada.

4. Los pacientes de la casa

Un cuidador tiene a veces dos personas a su cargo bajo el mismo techo, o tres. El Protocolo los lleva a todos, y cada uno tiene su propio expediente: su pauta, sus tomas, sus constantes, sus observaciones, su oxígeno. Nada se mezcla nunca.

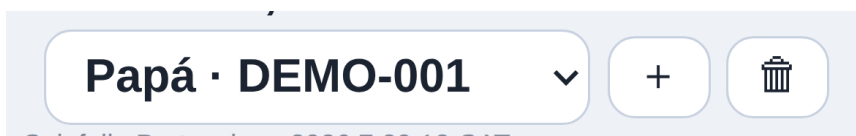


Figura 2 — Bajo la fecha: la lista de los pacientes, el botón de añadir y el de borrar.

El mando	Lo que hace
La lista	Se elige un nombre y toda la pantalla se rehace con sus datos
+	Añade un paciente: su nombre y, si se quiere, su identificador sanitario
	Borra el paciente elegido, previa confirmación

El formulario 'Paciente nuevo' contiene un icono de signo más en la esquina superior izquierda. Debajo, hay un campo de texto etiquetado 'Nombre' con un fondo naranja claro, y un campo de texto etiquetado 'SIP' con un fondo azul claro. En la parte inferior, hay dos botones: 'Cancelar' (con borde gris) y 'Aceptar' (de color azul sólido).

Figura 3 — Añadir un paciente.

El borrado nombra a quien se va a perder y cuántos días quedan registrados, y ofrece exportarlos antes de borrar. Un expediente no se tira por descuido.

La pantalla de confirmación '¿Borrar este paciente?' muestra un icono de papelera y el nombre 'Papá · DEMO-001'. Debajo, indica '2 días registrados se perderán.' Hay tres botones: 'Exportar y borrar' (azul con una flecha hacia abajo), 'Borrar sin exportar' (con borde gris) y 'Cancelar' (con borde gris).

Figura 4 — La confirmación antes de borrar.

4.1 Lo que es común y lo que es propio

El idioma, el tamaño de la letra, el tema claro u oscuro y la dirección del ordenador pertenecen al cuidador: son suyos, y no cambian al pasar de un paciente a otro. Todo lo demás pertenece al paciente.

4.2 Varias pestañas a la vez

Si trabaja en el ordenador, puede abrir el Protocolo en dos o tres pestañas y poner cada una en un paciente distinto: cada pestaña recuerda el suyo, incluso tras recargar. En el teléfono, la lista basta.

5. La pantalla del día

Es la pantalla donde se pasa el tiempo. Presenta el día en curso, organizado en momentos: desayuno, comida, cena y noche. Cada momento reúne los medicamentos que corresponden según la pauta; un toque marca la toma y graba la hora.

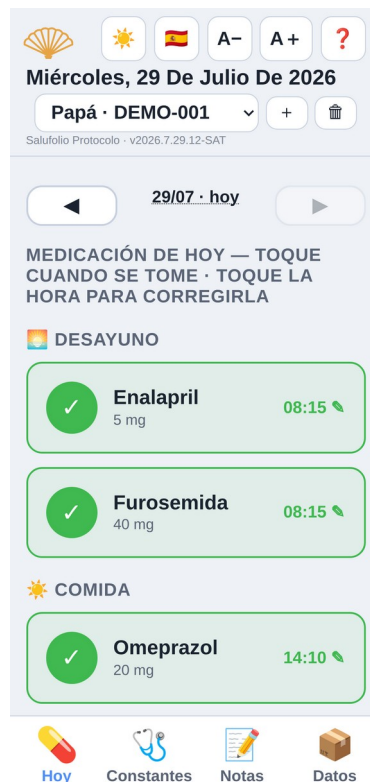


Figura 5 — La pantalla del día.

Las flechas ◀▶ de la cabecera permiten releer los días pasados.

6. Material y oxígeno

El oxígeno concentrado no se anota como una casilla sino como lo que es: un aparato que se enciende y se apaga. Un basculador lo reproduce.



Figura 6 — El basculador: O en reposo, I encendido con su lámpara. El caudal a la izquierda.

- Un toque del lado I inicia la sesión y graba la hora de inicio. La cara se hunde y se enciende en rojo.
- Otro toque del lado O la cierra y graba la hora de fin. La lámpara se apaga.
- Si cambia el caudal con el aparato en marcha, el cambio queda fechado dentro de la sesión.

Una sesión sin hora de fin es una sesión abierta, no un error.

7. Urgencias 112

Un episodio de urgencia tiene cuatro tiempos, y no cabe forzosamente en un día: se puede volver la misma tarde o quince días después.



Figura 7 — Un episodio abierto: llamada, llegada y salida; falta el regreso.

El botón dice	Lo que graba
Llamada	La hora de la llamada al 112
Llegada	La hora en que llegó la asistencia
Salida	La hora en que la persona salió del domicilio, con ambulancia o sin ella
Regreso	La hora del regreso a casa, sea cual sea el día

La fecha solo se escribe cuando cambia. El marco es rojo mientras la urgencia está en casa, y color miel cuando la persona está fuera.

8. Medicamentos

Cada medicamento se declara una vez con su nombre, su dosis y el momento en que se toma. Se modifica con el lápiz  y se conserva mientras no se cambie.

Salufolio Protocolo - v2026.7.29.12-SAT

Miércoles, 29 De Julio De 2026

Papá · DEMO-001

Paciente

Papá

SIP (tarjeta sanitaria, opcional)

DEMO-001

Medicamentos configurados

Avisos sonoros

Últimos 7 días

Guardar y compartir

Comentario

Hoy Constantes Notas Datos

Figura 8 — Datos: el paciente y su pauta.

Un medicamento que solo se toma cuando hace falta se declara en el momento «a demanda»: figura en la lista, pero no aparece nunca en la pantalla del día. Cuando esa toma ocurre, se registra aparte.

Toma puntual

Paracetamol · 1 g

otro...

Cancelar

Figura 9 — La elección para una toma puntual.

9. Constantes

Tensión, glucemia, peso, saturación y las demás medidas se introducen con su valor; la fecha y la hora las pone el programa. Cada cifra se guarda en el instante en que se teclea.

Salutolio Protocolo - v2026.7.29.12-SAT

CONSTANTES — DEJE VACÍO LO NO MEDIDO

Tensión sistólica 128 mmHg	Tensión diastólica 74 mmHg
Pulso 68 lpm	Saturación O₂ 95 %
Peso 61.4 kg	Temperatura 36.4 °C

Hoy
 Constantes
 Notas
 Datos

Figura 10 — Constantes, con las mediciones del día debajo del formulario.

Debajo del formulario, las mediciones del día aparecen en claro. Sirven para lo que más falta hacía: ver de un vistazo que la jornada ya tiene las suyas, sin confundir una casilla vacía con un dato perdido.

10. El día en observaciones

Escribir de noche en un teléfono es impracticable. Toda esta pantalla está hecha para que un toque baste.

Salufolio Protocolo · v2026.7.29.12-SAT

¿QUÉ SE OBSERVA HOY? — TOQUE LO QUE APLIQUE

Somnolencia tras comidas

Se duerme en conversación

Alimentación

Camina, Siesta

Dolor cabeza

Dolor espalda

Dolor muslo

Dolor pierna

Dolor rodilla

Dolor tobillo

Dolor manos

Pierna derecha hinchada

Hoy Constantes Notas Datos

Figura 11 — La pantalla de las observaciones.

10.1 Los registros del cuerpo

Cuatro líneas siempre visibles registran lo que se repite muchas veces al día: hidratación, cambios de pañal, deposiciones y micciones. El número del día se escribe delante de cada elección, en singular o en plural según convenga.

Hidratación 3 vasos

Cambio de pañal 2 pañales

1 Normal

Deposición Duras

Líquidas

1 Normal

Micción 1 Escasa

Frecuentes

↑

Figura 12 — Los cuatro registros del cuerpo, con el recuento del día.

10.2 La hidratación

Se toca «vasos» y se elige la bebida. La ventana recuerda lo ya bebido. El botón está gris mientras no se haya bebido nada — y eso también es una información.

Figura 13 — Las bebidas, con lo ya bebido hoy.

10.3 El vocabulario de observación


Lo frecuente se registra con un toque. Varios acontecimientos abren una precisión, y el botón pasa a decir el estado resultante en una sola frase.

Figura 14 — La precisión. La elección en curso queda encendida.

Para anular, se vuelve a tocar la elección encendida: se apaga y la observación se retira. Elegir otra reemplaza, no acumula.

10.4 Las ocupaciones

Un día puede contener varias ocupaciones. Esta familia admite por tanto varias elecciones a la vez; «Nada» es exclusivo.

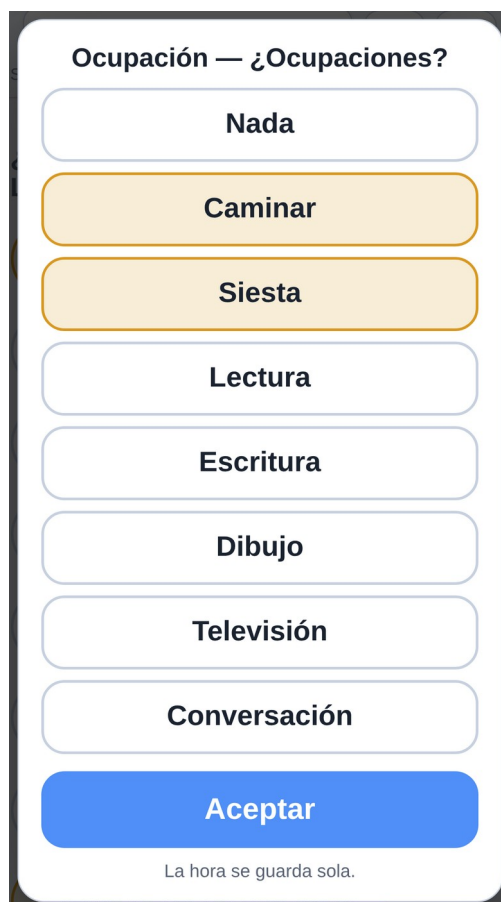

The screenshot shows a mobile application interface with a title bar at the top that reads "Ocupación — ¿Ocupaciones?". Below the title bar is a list of eight rounded rectangular buttons stacked vertically. The first button is labeled "Nada" and has a light gray background. The second button is labeled "Caminar" and the third is labeled "Siesta"; both have an orange background and a thin orange border. The remaining four buttons, labeled "Lectura", "Escritura", "Dibujo", and "Televisión", have a light gray background. Below these is a button labeled "Conversación" with a light gray background. At the bottom of the list is a blue button labeled "Aceptar". Below the buttons, there is a small line of text that says "La hora se guarda sola."

Figura 15 — Las ocupaciones, a elección múltiple.

10.5 Corregir una hora

Se anota primero y se corrige después: el programa ofrece la lista de lo anotado hoy, se toca la línea y se ajusta la hora.

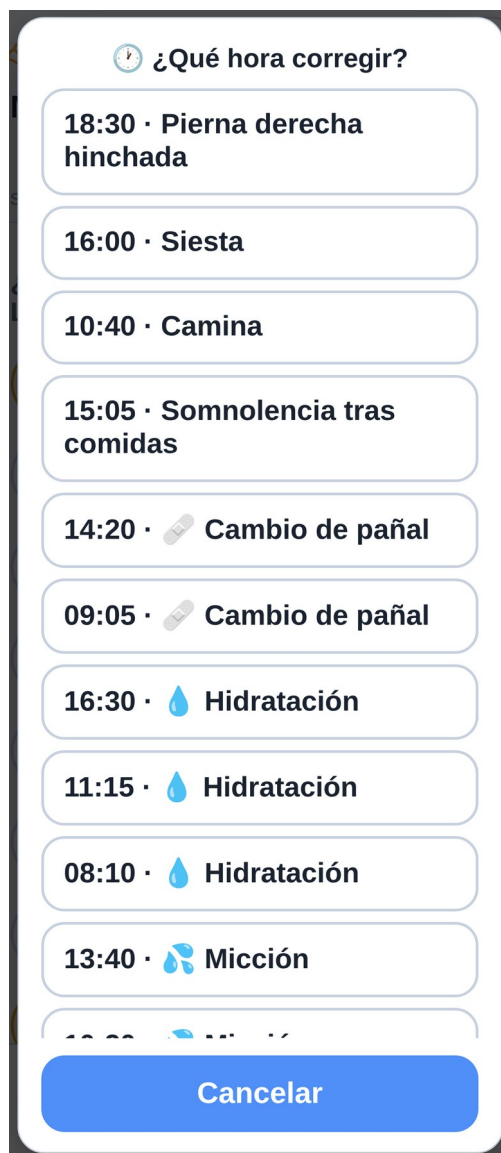


Figura 16 — Lo anotado hoy, lo más reciente en cabeza.

11. Historial

El historial conserva los últimos sesenta días. Permite releer una jornada y comprobar lo que se registró.

12. Guardar, enviar y restaurar

Junto al emblema, una pastilla indica si el ordenador contesta: verde llena si contesta, contorno rojo si no. Dice que la máquina está ahí — no que un paquete concreto haya sido aceptado.



Figura 17 — Guardar y compartir.

«Enviar» deposita una copia del día en el ordenador; nada se borra del teléfono. El envío parte sin esperar respuesta, y por eso el botón está siempre activo. La comprobación se hace en el ordenador, en la bandeja de Salufolio.

«Exportar» produce un fichero JSON del paciente en curso; « Restaurar copia» lo vuelve a cargar tras pedir confirmación.

13. Idioma y ayuda

El programa habla español, valenciano, francés e inglés; el idioma se cambia en cualquier momento y no afecta a los datos guardados.

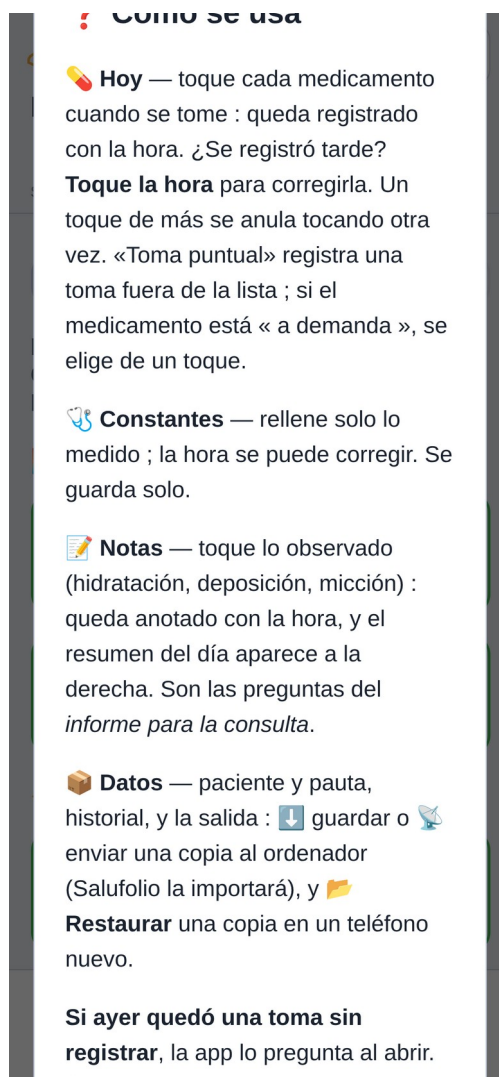


Figura 18 — La ayuda «Cómo se usa».

14. Decir lo que se piensa

Un espacio recoge lo que usted quiera decir del programa. Basta tocar una cara para que aparezcan los botones: una sonrisa también es un comentario.



Figura 19 — El espacio de comentarios.

Adónde va lo que escribe: a ninguna parte. Se guarda en su propio teléfono, fechado. El botón «↓ comentarios» reúne lo acumulado en un fichero que usted decide entregar — o no.

15. Si algo no funciona

Síntoma	Causa habitual	Qué hacer
La antena está en rojo	El ordenador está apagado, el servidor no está en marcha, o el teléfono está en datos móviles	Encender el ordenador y arrancar el servidor; comprobar el Wi-Fi
La antena sigue roja	La dirección del ordenador ha cambiado	Leer la que anuncia el servidor al arrancar y volver a escribirla
El envío no se confirma	Es lo normal con el satélite	Comprobarlo en el ordenador, en la bandeja
Un mando queda fuera de la pantalla	La letra es demasiado grande para el ancho	Reducir con A–
Los datos parecen de otro paciente	Se está mirando otra pestaña	Comprobar el nombre en la lista, bajo la fecha

PROTOCOLE MOBILE

Mode d'emploi

Mode d'emploi — version 1.0

Composant mobile du projet Salufolio

Pierre-Henri Giraud

Ingénieur informaticien retraité · Les Useres (Castellón), Espagne
Juillet 2026

Logiciel libre — GNU General Public License v3

salufolio.com · github.com/caracole/Salufolio · salufolio@proton.me

Décrit la version 2026.7.29.12-SAT. Les figures sont de vraies captures, en thème clair pour l'impression, avec des données de démonstration.

1. Ce que c'est, ce que ce n'est pas

Le Protocole mobile est un carnet de soins qui vit sur le téléphone posé au chevet du lit. On y relève, d'un toucher, ce qui vient de se produire : une prise, une tension, un verre d'eau, une mauvaise nuit, l'oxygène qu'on allume. Les données sont conservées dans l'appareil lui-même et n'en sortent pas, sauf lorsque vous les envoyez à l'ordinateur de la maison.

Ce que ce n'est pas : ni un rappel, ni un diagnostic, ni une alarme. Le programme n'interprète rien et ne vous demandera jamais rien. Si un jour vous ne notez rien, il ne se passe rien.

Trois règles gouvernent toute la maison. Tout ce que vous écrivez s'enregistre seul, à l'instant même du geste : il n'y a aucun bouton « Enregistrer ». Ce qui ne peut pas marcher ne se montre pas. Et rien ne vous sera exigé : ni rituel, ni rappel, ni case obligatoire.

2. Installation

Il y a deux façons d'avoir le Protocole sur le téléphone. Les deux envoient à l'ordinateur ; la seconde évite d'avoir à recopier le fichier à chaque version nouvelle.

2.1 Copie locale du fichier

Le Protocole est un fichier HTML unique. Copiez-le sur le téléphone et ouvrez-le avec le navigateur. Il fonctionne sans connexion, n'importe où. Depuis la version satellite, cette copie locale envoie tout aussi bien : le paquet part sans attendre de réponse, comme un formulaire qu'on dépose.

2.2 Servi par l'ordinateur de la maison (plus commode)

Le serveur étant en marche, ouvrez sur le téléphone l'adresse qu'il annonce lui-même au démarrage, suivie de /protocolo :

```
http://<adresse-de-l'ordinateur>:7777/protocolo
```

Ajoutez la page à l'écran d'accueil : elle apparaîtra comme une application.

Avertissement : le téléphone et l'ordinateur doivent être sur le même Wi-Fi. En données mobiles, aucun dialogue n'est possible.

3. Premier démarrage

La première fois, la maison se présente : l'hexagone vert de Salufolio et la coquille du pèlerin. Cet écran ne se voit qu'une fois.



Figure 1 — L'accueil, aux armes de la maison. Il ne revient plus.

Ensuite, le programme demande le premier patient. Il n'y a pas moyen de commencer sans nommer quelqu'un : un carnet de soins sans patient ne voudrait rien dire.

4. Les patients de la maison

Un aidant a parfois deux personnes à sa charge sous le même toit, ou trois. Le Protocole les porte toutes, et chacune a son propre dossier : sa pauta, ses prises, ses constantes, ses observations, son oxygène. Rien ne se mélange jamais.

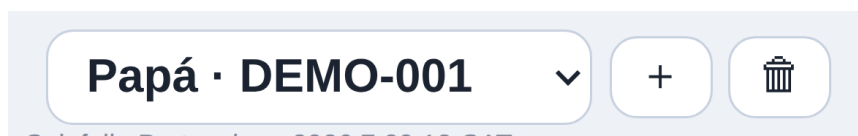


Figure 2 — Sous la date : la liste des patients, le bouton d'ajout et celui de suppression.

La commande	Ce qu'elle fait
La liste	On choisit un nom et tout l'écran se refait avec ses données
+	Ajoute un patient : son nom et, si l'on veut, son identifiant sanitaire
	Supprime le patient choisi, après confirmation

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new patient. At the top, there is a title bar with a plus icon and the text 'Nouveau patient'. Below this, there are two input fields: 'Nom' (Name) with an orange border and 'SIP' (Social Insurance Number) with a light blue border. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) in a light blue box and 'Valider' (Validate) in a blue box.

Figure 3 — Ajouter un patient.

La suppression nomme celui qu'on va perdre et combien de jours sont enregistrés, et propose de les exporter avant d'effacer. Un dossier ne se jette pas par mégarde.

The screenshot shows a confirmation dialog for deleting a patient. The title is 'Supprimer ce patient ?' with a trash can icon. Below the title, the patient's name 'Papá · DEMO-001' is displayed, followed by the text '2 jours enregistrés seront perdus.' (2 recorded days will be lost). There are three buttons: a large blue button with a downward arrow and the text 'Exporter puis supprimer' (Export then delete), a light blue button with the text 'Supprimer sans exporter' (Delete without export), and a light blue button at the bottom with the text 'Annuler' (Cancel).

Figure 4 — La confirmation avant de supprimer.

4.1 Ce qui est commun et ce qui est propre

La langue, la taille de la lettre, le thème clair ou sombre et l'adresse de l'ordinateur appartiennent à l'aidant : ce sont les siens, et ils ne changent pas quand on passe d'un patient à l'autre. Tout le reste appartient au patient.

4.2 Plusieurs onglets à la fois

Si vous travaillez sur l'ordinateur, vous pouvez ouvrir le Protocole dans deux ou trois onglets et mettre chacun sur un patient différent : chaque onglet se souvient du sien, même après un rechargement. Sur le téléphone, la liste suffit.

5. L'écran du jour

C'est l'écran où l'on passe son temps. Il présente la journée en cours, organisée en moments : petit-déjeuner, déjeuner, dîner et nuit. Chaque moment rassemble les médicaments qui lui reviennent ; un toucher marque la prise et grave l'heure.



Figure 5 — L'écran du jour.

Les flèches ◀▶ de l'en-tête permettent de relire les jours passés.

6. Matériel et oxygène

L'oxygène concentré ne se note pas comme une case mais comme ce qu'il est : un appareil qu'on allume et qu'on éteint. Un basculeur le reproduit.



Figure 6 — Le basculeur : O au repos, I allumé avec sa lampe. Le débit à gauche.

- Un toucher du côté I ouvre la session et grave l'heure de début. La face s'enfonce et s'allume en rouge.

- Un autre toucher du côté O la referme et grave l'heure de fin. La lampe s'éteint.
- Si vous changez le débit appareil en marche, le changement est horodaté à l'intérieur de la session.

Une session sans heure de fin est une session ouverte, non une erreur.

7. Urgences 112

Un épisode d'urgence a quatre temps, et il ne tient pas forcément dans une journée : on peut rentrer le soir même ou quinze jours plus tard.

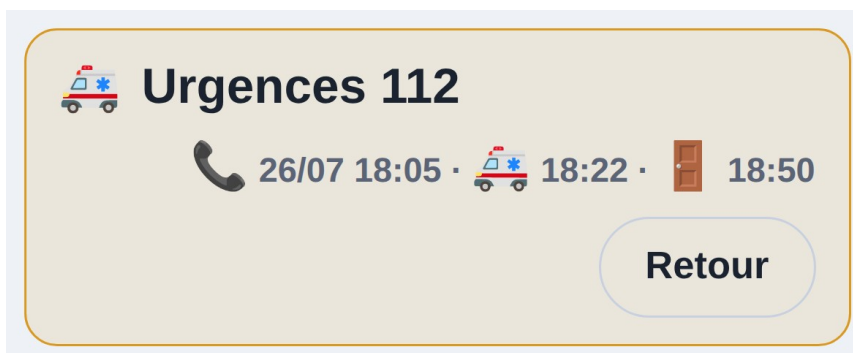


Figure 7 — Un épisode ouvert : appel, arrivée et départ ; le retour manque.

Le bouton dit	Ce qu'il grave
Appel	L'heure de l'appel au 112
Arrivée	L'heure où les secours sont arrivés
Départ	L'heure où la personne a quitté le domicile, avec ou sans ambulance
Retour	L'heure du retour à la maison, quel qu'en soit le jour

La date ne s'écrit que lorsqu'elle change. Le cadre est rouge tant que l'urgence est à la maison, couleur miel dès que la personne est dehors.

8. Médicaments

Chaque médicament se déclare une fois avec son nom, sa dose et le moment où il se prend. On le modifie par le crayon  et il demeure tant qu'on ne le change pas.

The screenshot shows the Salufolio app interface. At the top, there are icons for a fan, sun, French flag, and volume controls (A-, A+, ?). Below these is the date "Mercredi 29 Juillet 2026" and a patient selection dropdown showing "Papá · DEMO-001". A small text "Salufolio Protocolo - v2026.7.29.12-SAT" is visible. The main content area has a "Patient" section with a dropdown arrow, containing "Papá" and "DEMO-001" (labeled as "SIP (carte sanitaire, optionnel)"). Below this are buttons for "Médicaments configurés", "Rappels sonores", "7 derniers jours", "Sauvegarder et partager", and "Commentaire". At the bottom, there is a navigation bar with icons and labels: "Aujourd'hui", "Constantes", "Notes", and "Données" (which is highlighted in blue).

Figure 8 — Données : le patient et sa pauta.

Un médicament qui ne se prend que lorsqu'il le faut se déclare au moment « à la demande » : il figure dans la liste, mais n'apparaît jamais dans l'écran du jour. Lorsque cette prise a lieu, on l'enregistre à part.

The screenshot shows a dialog box titled "Prise ponctuelle". It contains a text input field with "Paracetamol · 1 g", a smaller text input field with "otro...", and a large "Annuler" (Cancel) button at the bottom.

Figure 9 — Le choix pour une prise ponctuelle.

9. Constantes

Tension, glycémie, poids, saturation et les autres mesures se saisissent avec leur valeur ; la date et l'heure, c'est le programme qui les pose. Chaque chiffre s'enregistre à l'instant où il est tapé.

Mercredi 29 Juillet 2026

Papá · DEMO-001

Salutolio Protocolo - v2026.7.29.12-SAT

CONSTANTES — LAISSEZ VIDE CE QUI N'EST PAS MESURÉ

Tension systolique 128 mmHg	Tension diastolique 74 mmHg
Pouls 68 lpm	Saturation O ₂ 95 %
Poids 61.4 kg	Température 36.4 °C

Aujourd'hui Constantes Notes Données

Figure 10 — Constantes, avec les mesures du jour sous le formulaire.

Sous le formulaire, les mesures de la journée s'affichent en clair. Elles servent à ce qui manquait le plus : voir d'un coup d'œil que la journée a déjà les siennes, sans confondre une case vide avec une donnée perdue.

10. La journée en observations

Écrire la nuit sur un téléphone est impraticable. Tout cet écran est fait pour qu'un toucher suffise.

Figure 11 — L'écran des observations.


10.1 Les registres du corps

Quatre lignes toujours visibles relèvent ce qui se répète plusieurs fois par jour : hydratation, changements de couche, selles et urines. Le nombre du jour s'écrit devant chaque choix, au singulier ou au pluriel selon qu'il convient.

Figure 12 — Les quatre registres du corps, avec le compte du jour.

10.2 L'hydratation

On touche « verres » et l'on choisit la boisson. La fenêtre se souvient de ce qui a déjà été bu. Le bouton reste gris tant que rien n'a été bu — et cela aussi est une information.

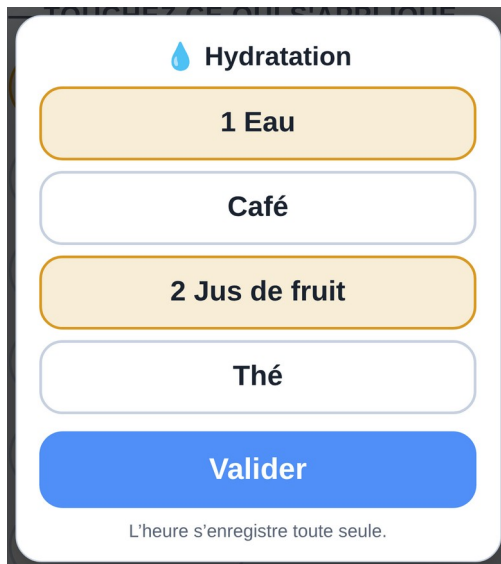


The screenshot shows a mobile application interface for hydration tracking. At the top, there is a blue water drop icon followed by the title 'Hydratation'. Below the title, there are five buttons arranged vertically. The first button is orange and labeled '1 Eau'. The second button is white with a grey border and labeled 'Café'. The third button is orange and labeled '2 Jus de fruit'. The fourth button is white with a grey border and labeled 'Thé'. The fifth button is blue and labeled 'Valider'. At the bottom of the screen, there is a small text line that reads 'L'heure s'enregistre toute seule.'

Figure 13 — Les boissons, avec ce qui a déjà été bu.

10.3 Le vocabulaire d'observation

Ce qui est fréquent se relève d'un toucher. Plusieurs événements ouvrent une précision, et le bouton dit alors l'état résultant en une seule phrase.

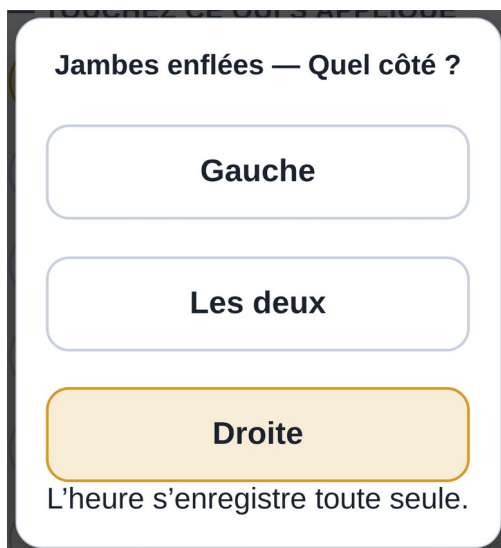


The screenshot shows a mobile application interface for tracking leg swelling. At the top, there is a title 'Jambes enflées — Quel côté ?'. Below the title, there are three buttons arranged vertically. The first button is white with a grey border and labeled 'Gauche'. The second button is white with a grey border and labeled 'Les deux'. The third button is orange and labeled 'Droite'. At the bottom of the screen, there is a small text line that reads 'L'heure s'enregistre toute seule.'

Figure 14 — La précision. Le choix en cours reste allumé.

Pour annuler, on retouche le choix allumé : il s'éteint et l'observation est retirée. En choisir un autre remplace, cela n'accumule pas.

10.4 Les occupations

Une journée peut contenir plusieurs occupations. Cette famille admet donc plusieurs choix à la fois ; « Rien » est exclusif.

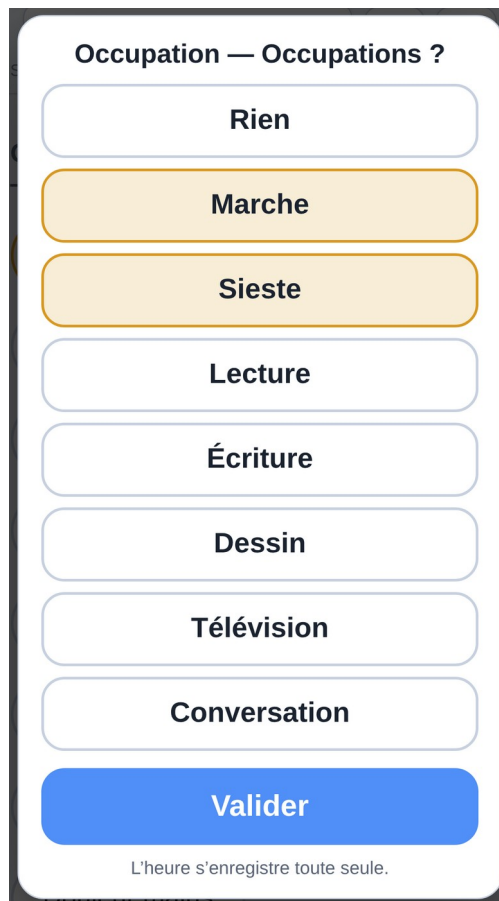

Occupation — Occupations ?

Rien

Marche

Sieste

Lecture

Écriture

Dessin

Télévision

Conversation

Valider

L'heure s'enregistre toute seule.

Figure 15 — Les occupations, à choix multiple.

10.5 Corriger une heure

On note d'abord, on corrige ensuite : le programme offre la liste de ce qui a été noté aujourd'hui, on touche la ligne et l'on ajuste l'heure.

Quelle heure corriger ?

18:30 · Jambe droite enflée

16:00 · Sieste

10:40 · Marche

15:05 · Somnolence après les repas

14:20 ·  Changeement de couche

09:05 ·  Changeement de couche

16:30 ·  Hydratation

11:15 ·  Hydratation

08:10 ·  Hydratation

13:40 ·  Urine

Annuler

Figure 16 — Ce qui a été noté aujourd’hui, le plus récent en tête.

11. Historique

L’historique conserve les soixante derniers jours. Il permet de relire une journée et de vérifier ce qui a été relevé.

12. Enregistrer, envoyer, restaurer

Près de l’emblème, une pastille dit si l’ordinateur répond : verte pleine s’il répond, contour rouge sinon. Elle dit que la machine est là — non qu’un paquet donné a été accepté.



Figure 17 — Enregistrer et partager.

« Envoyer » dépose une copie de la journée sur l'ordinateur ; rien n'est effacé du téléphone. L'envoi part sans attendre de réponse, et c'est pourquoi le bouton est toujours actif. La vérification se fait sur l'ordinateur, dans la boîte de réception de Salufolio.

« Exporter » produit un fichier JSON du patient en cours ; « Restaurer une copie » le recharge après confirmation.

13. Langue et aide

Le programme parle espagnol, valencien, français et anglais ; la langue se change à tout moment et n'affecte pas les données enregistrées.

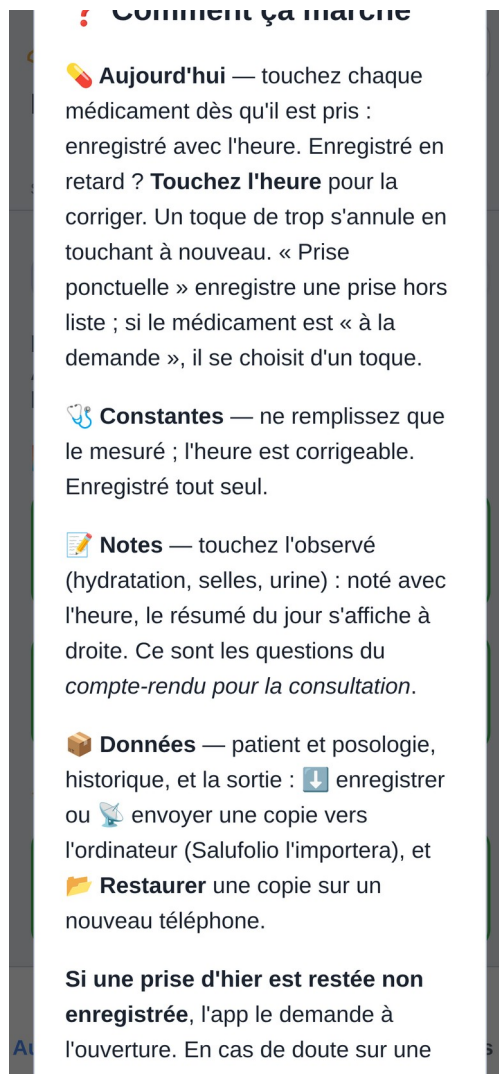


Figure 18 — L'aide « *Cómo se usa* ».

14. Dire ce qu'on en pense

Un espace recueille ce que vous voulez dire du programme. Il suffit de toucher un visage pour que les boutons apparaissent : un sourire est aussi un commentaire.



Figure 19 — L'espace de commentaires.

Où va ce que vous écrivez : nulle part. C'est conservé dans votre propre téléphone, daté. Le bouton « ↓ comentarios » rassemble le tout dans un fichier que vous décidez de remettre — ou non.

15. Si quelque chose ne marche pas

Symptôme	Cause habituelle	Que faire
L'antenne est rouge	L'ordinateur est éteint, le serveur n'est pas lancé, ou le téléphone est en données mobiles	Allumer l'ordinateur et lancer le serveur ; vérifier le Wi-Fi
L'antenne reste rouge	L'adresse de l'ordinateur a changé	Lire celle qu'annonce le serveur au démarrage et la ressaisir
L'envoi n'est pas confirmé	C'est normal avec le satellite	Le vérifier sur l'ordinateur, dans la boîte de réception
Une commande reste hors de l'écran	La lettre est trop grande pour la largeur	Réduire avec A–
Les données semblent d'un autre patient	On regarde un autre onglet	Vérifier le nom dans la liste, sous la date